


# BROSSES CYTOLOGIQUES

**BROSSES**

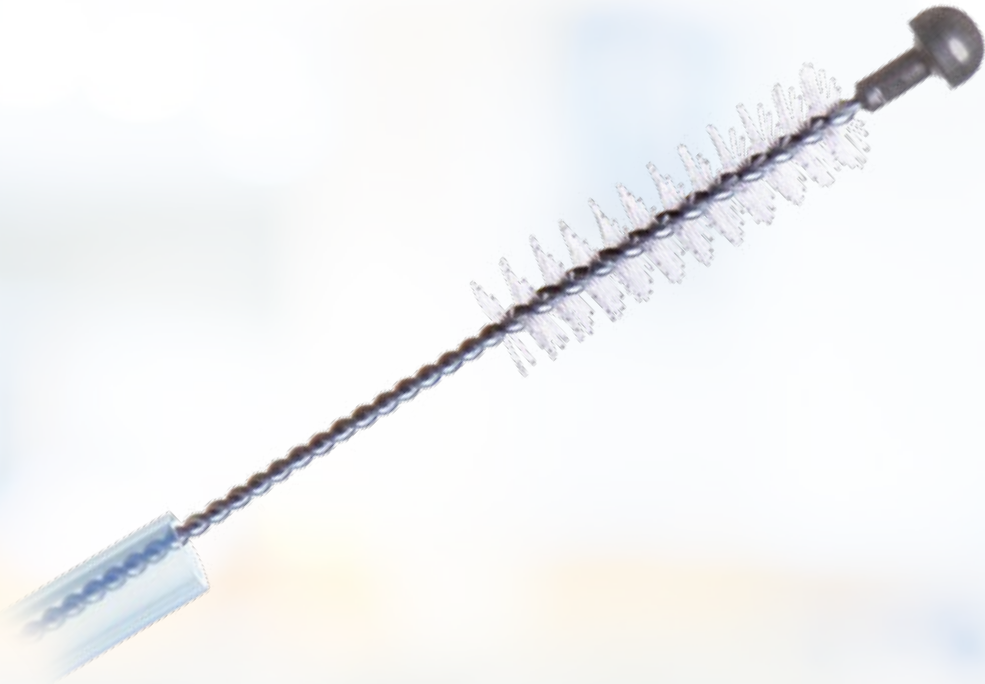

# BROSSES CYTOLOGIQUES


## LA SOLUTION POUR DES FROTTIS CYTOLOGIQUES SIMPLIFIÉS ET SÛRS

Une méthode établie d'acquisition de spécimens cellulaires consiste à réaliser des frottis cytologiques à l'aide de brosses cytologiques : MICRO-TECH rend le frottis cytologique efficace et sûr, grâce à une série de brosses cytologiques spécialement adaptées aux exigences cliniques. La brosse de cytologie MICRO-TECH peut être facilement

poussée vers le site souhaité à travers l'endoscope. Les poils fins permettent un frottis cytologique épargnant les tissus. Le tube en plastique et la bille distale de fermeture protègent l'échantillon de tissu lorsque le dispositif est rétracté. Toute contamination potentielle de l'échantillon ou même perte de l'échantillon est ainsi exclue.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Poils fins pour une collecte optimale des cellules
- Comprend un tube en plastique et une tête métallique ronde pour une fermeture étanche
- Adaptée aux endoscopes dont le diamètre minimal du canal opérateur est de 2,0 mm
- Emballage individuel stérile

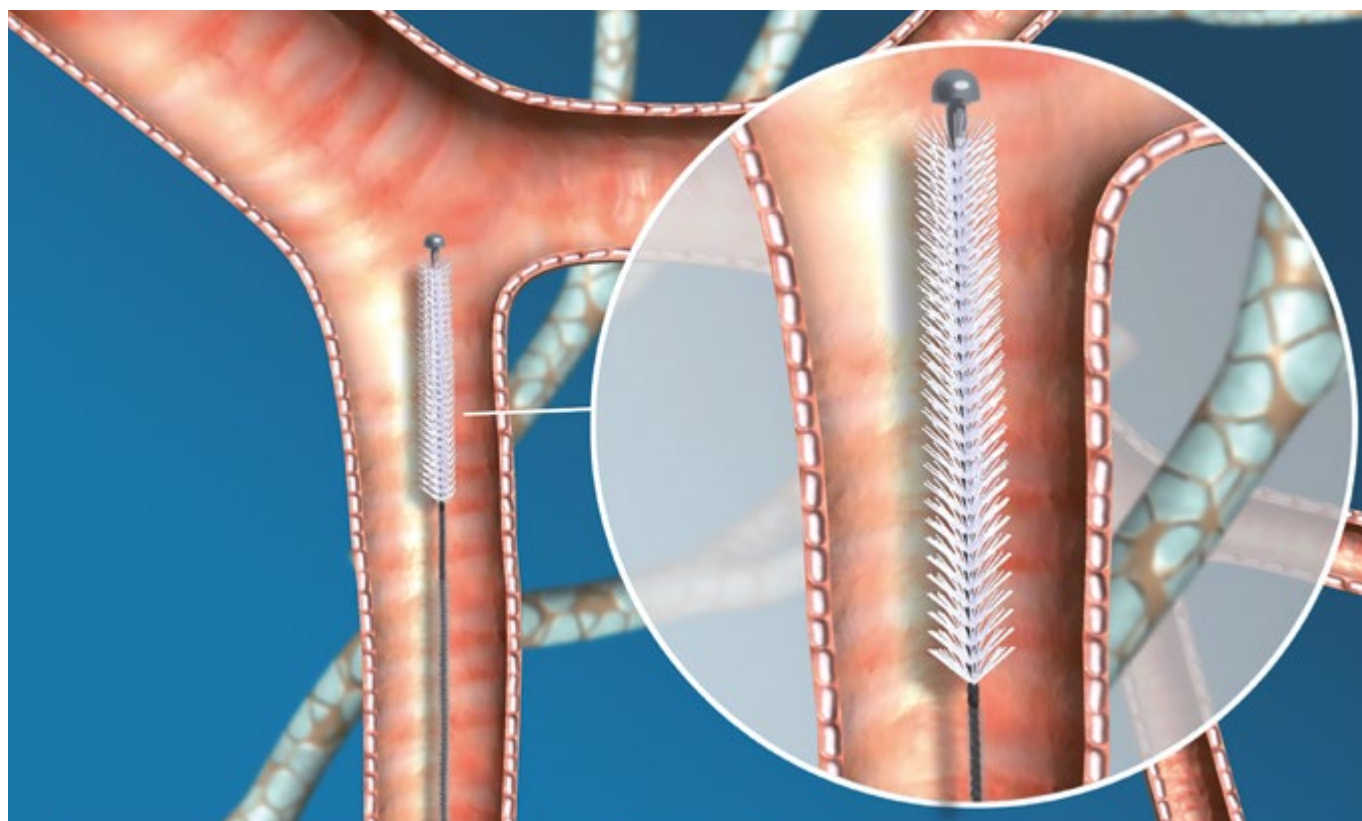

### INTRODUCTION SÛRE ET CONTRÔLÉE

Les brosses de cytologie MICRO-TECH vous permettent d'accéder aux lésions difficiles à atteindre, facilement et en toute sécurité. La poignée ergonomique à 3 anneaux offre également à l'utilisateur une prise en main sûre et confortable. Chaque mouvement est transmis à la tête de la brosse, directement et avec précision.



Poignée ergonomique

### UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

MICRO-TECH propose une grande variété de modèles de brosses de cytologie adaptées à de nombreux domaines d'application et répondant aux exigences cliniques.

## CARACTÉRISTIQUES

RÉF.	Ø brosse (mm)	Longueur (mm)	Ø cathéter (mm)
<b>BROSSE CYTOLOGIQUE A USAGE UNIQUE</b>			
CYB-24S-12C	2,4	1 200	1,8
CYB-30S-12C	3,0	1 200	1,8
CYB-40S-12C	4,0	1 200	1,8

Conditionnement : 20 pièces

