



EYEMAX

VIDÉO CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE À USAGE UNIQUE

YOUR TRUSTED PARTNER IN ENDOSCOPY





EYEMAX - VIDÉO CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE À USAGE UNIQUE

VISUALISATION ENDOSCOPIQUE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

- Procédure fiable à faible risque dans le diagnostic et le traitement des maladies aiguës ou chroniques des voies biliaires et du pancréas
- Exposition réduite aux rayonnements par rapport à la CPRE standard
- La haute définition des images assure une plus grande précision dans le diagnostic, la biopsie et le traitement des calculs, sténoses, infections et tumeurs
- Compatible avec tous les dispositifs d'EHL courants



CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE

HAUTE DÉFINITION, ANGLE DE VISION DE 120°

- Amélioration des prélèvements et du retrait de corps étrangers
- Visibilité optimale pour une lithotripsie efficace
- Petit diamètre externe pour faciliter le passage des sténoses




BEQUILLAGE
4 DIRECTIONS

IMAGE
HAUTE DEFINITION

ÉCLAIRAGE LED

LARGE CANAL
OPÉRATEUR

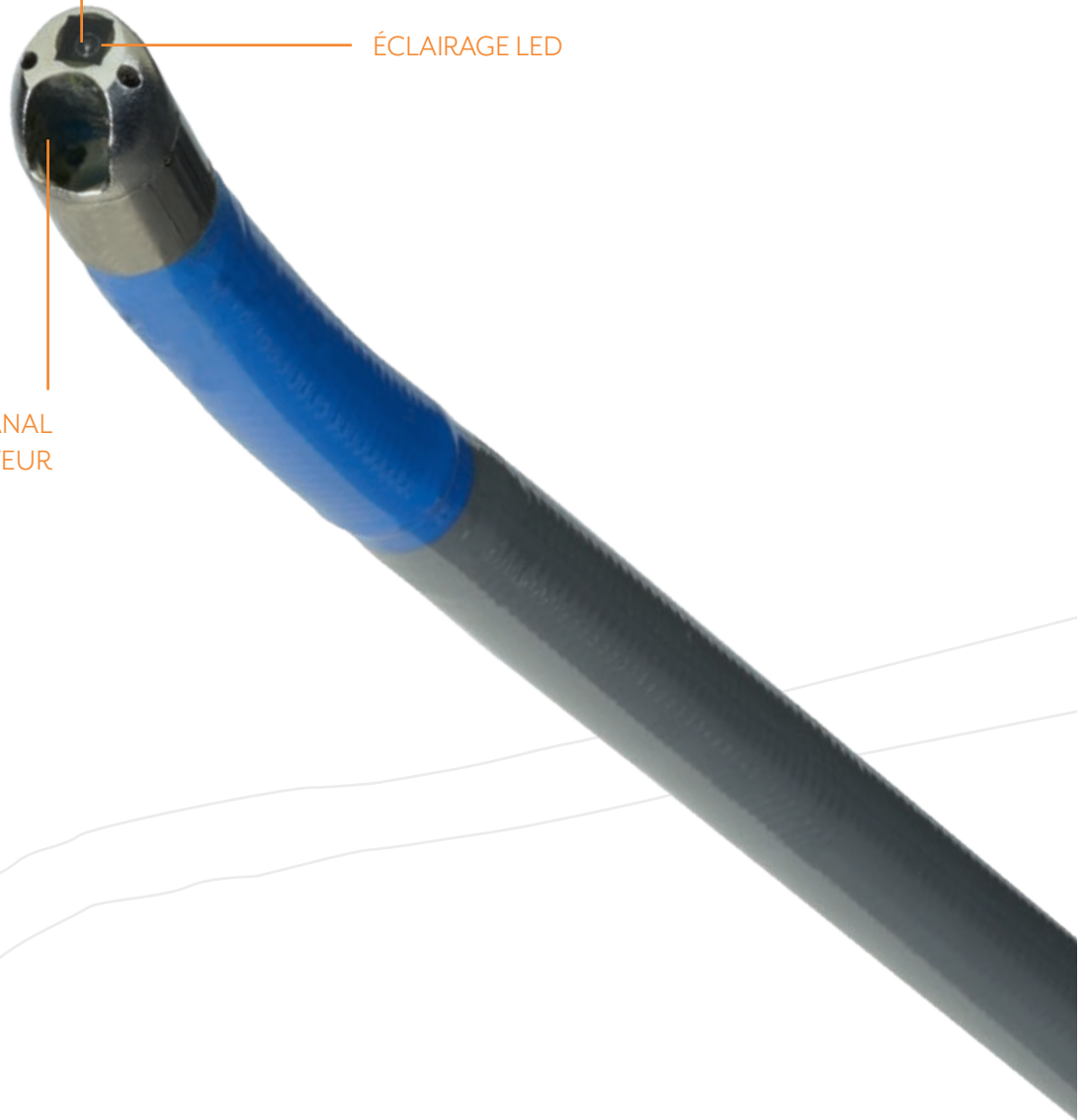




ACCÈS AU CANAL
OPÉRATEUR AVEC
RACCORD LUER-LOCK

FONCTION DE VERROUILLAGE
POUR SÉCURISER LE BEQUILLAGE

ACCROCHE
SÉCURISÉE AVEC
LE HARNAIS

BOUTON GEL POUR LA
VISUALISATION PRÉCISE
DES DÉTAILS SUR L'IMAGE

MANETTES DE
BEQUILLAGE POUR
LE MOUVEMENT DE
L'EXTRÉMITÉ DISTALE
HAUT/BAS ET
GAUCHE/DROITE

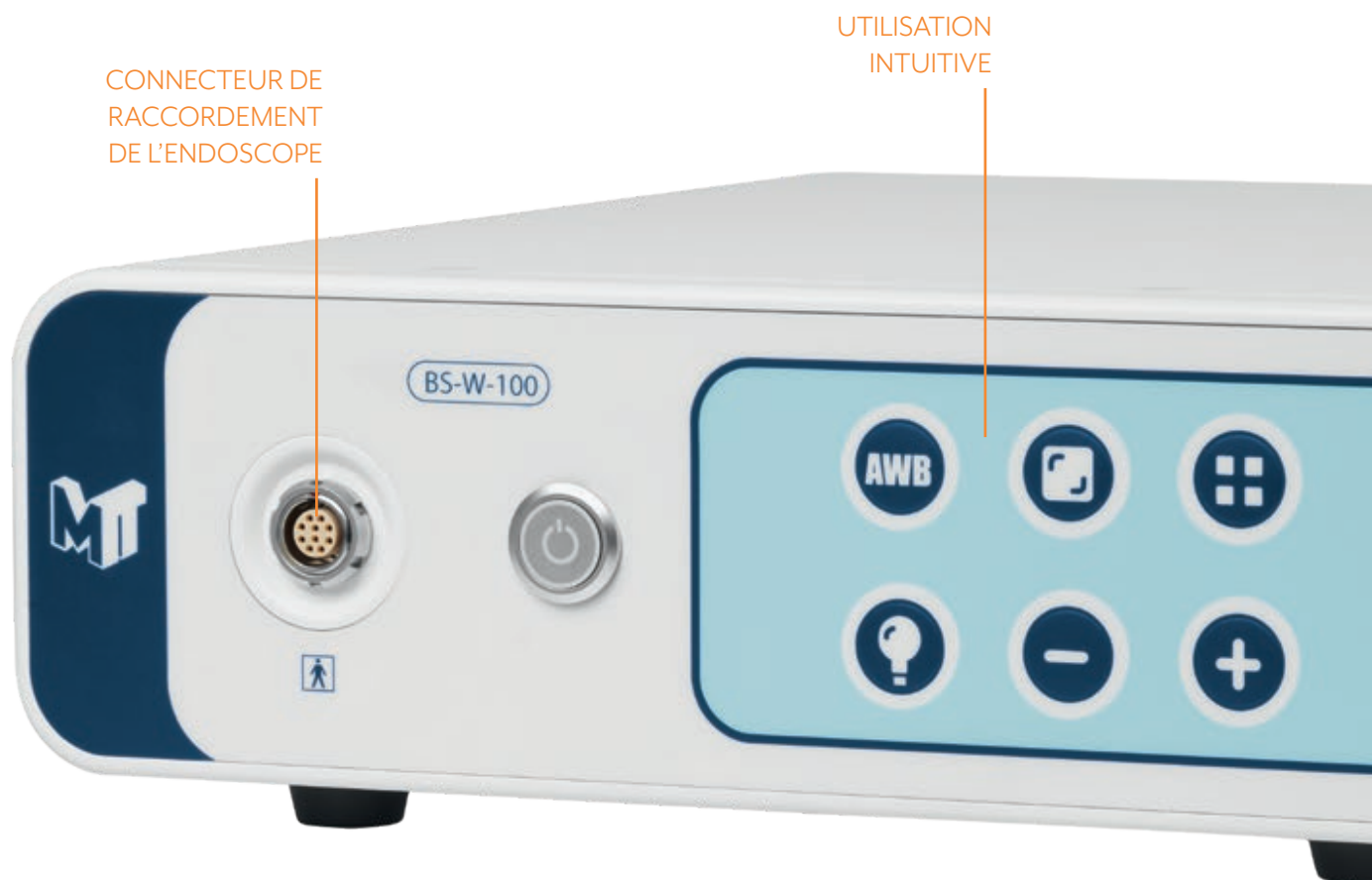

PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE

TRAITEMENT EFFICACE DE L'IMAGE

- Transfert qualitatif des images vidéo à haute définition
- Simplicité d'utilisation
- Agrandissement de l'image jusqu'à 3x
- Affichage réglable de la vision endoscopique



EXCELLENTE QUALITÉ D'IMAGE

Le cholangio-pancréatoscope EYEMAX offre une excellente qualité d'image à haute définition pour une meilleure visualisation des voies biliaires et pancréatiques susceptible de réduire le nombre d'examens.



HARNAIS

POUR UN CONFORT D'UTILISATION MAXIMAL

- Alternative ergonomique à la fixation sécurisée conventionnelle
- Soulagement lors d'examens longs, car le poids du cholangio-pancréatoscope et du duodénolescope ne doit pas être supporté par une seule main
- Utilisation à une seule main garantie du cholangio-pancréatoscope



Une fixation sécurisée est assurée par l'accroche sur la poignée du cholangio-pancréatoscope et le raccordement au harnais.



Le cholangio-pancréatoscope est verrouillé et fixé au harnais pour permettre une utilisation à une seule main.



ACCESSOIRES COMPATIBLES

POUR UNE UTILISATION RÉUSSIE

- Large canal opérateur de 1,2 mm ou 2,0 mm de diamètre pour des échantillons probants et des prélèvements facilités
- Introduction facile de la pince même lorsque l'endoscope est béquillé grâce à l'extrémité distale rigide et courte de la pince
- Des fluides peuvent être injectés non seulement via les canaux d'irrigation, mais aussi via le canal opérateur



CARACTÉRISTIQUES

RÉF.	Ø cathéter maxi. mm	Ø canal opérateur mm	Longueur utile mm
CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE AVEC HARNAIS			
CDS11006	3,9	2,0	2 200
CDS22006	3,2	1,2	2 200
CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE AVEC ATTACHE DUODÉNOSCOPE			
CDS11001	3,9	2,0	2 200
CDS22001	3,2	1,2	2 200
CHOLANGIO-PANCRÉATOSCOPE SANS ATTACHE SANS HARNAIS			
CDS11005	3,9	2,0	650
CDS22005	3,2	1,2	650

Conditionnement : 1 pièce

RÉF.	Sorties vidéo	Alimentation électrique	Dimensions (L x l x H) mm	Poids
PROCESSEUR				
BS-W-100	DVI-D, Composite	230V	355 x 297 x 107	6 kg

Conditionnement : 1 pièce

RÉF.	Ø canal opérateur mini. mm	Longueur mm	Largeur d'ouverture mm	Ø mors mm	Pic	Revêtement	Type
ACCESSOIRES (PINCE)							
BF10001	1,1	1 200	3	1,0	Sans	PTFE	Alligator
BF10006	1,1	2 900	3	1,0	Sans	PTFE	Alligator
BF16001	1,8	1 200	4,5	1,6	Sans	PE	Alligator
BF16006	1,8	2 900	4,2	1,6	Sans	PE	Alligator

Conditionnement : 2 pièces



Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Rév. 19.09.2023